


Konfiguracja

1 NAPEŁNIANIE

NAPEŁNIĆ KANAŁ NA LEK

za pomocą heparyny, aż płyn wyjdzie ze wszystkich portów bocznych

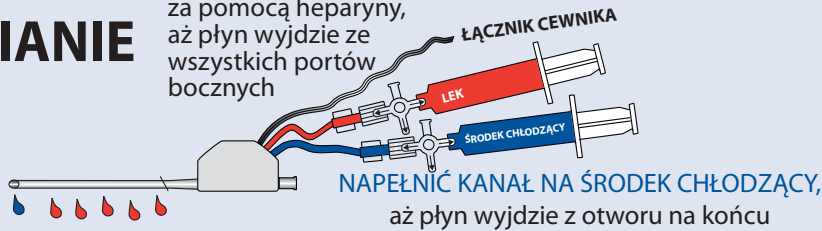

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno zasysać krwi z powrotem do kanału na lek



2 UMIESZCZANIE


UMIEŚCIĆ CEWNIK W CIELE PACJENTA (koszulka o rozmiarze 6F lub większym i przewodnik 0,889 mm (0,035 cala))

OSTRZEŻENIE!

Nie stosować koszulki introduktora z obrotową zastawką hemostatyczną



3 WPROWADZANIE

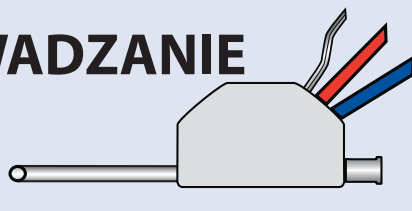

WYMIENIĆ PROWADNIK NA URZĄDZENIE MICROSONIC

OSTRZEŻENIE!


Nie używać urządzenia MicroSonic, które zostało zagięte podczas wprowadzania w cewnik



4 POMPA

PODŁĄCZYĆ KANAŁ NA LEK DO POMPY INFUZYJNEJ

Wykonać wlew zgodnie z protokołem obowiązującym w szpitalu
Maks. 35 ml/godz.
Min. 5 ml/godz.

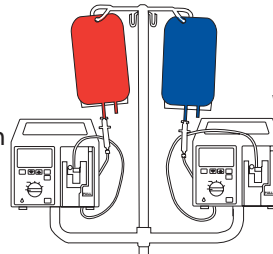

PODŁĄCZYĆ KANAŁ NA ŚRODEK CHŁODZĄCY DO POMPY INFUZYJNEJ


Wykonać wlew zgodnie z protokołem obowiązującym w szpitalu
Maks. 120 ml/godz.
Min. 35 ml/godz.

WŁĄCZYĆ POMPE INFUZYJNĄ

5 PODŁĄCZENIE

PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE WEWNĄTRZNACZYNIOWE DO PRZEWODU INTERFEJSU ZŁĄCZA



Złącza urządzenia

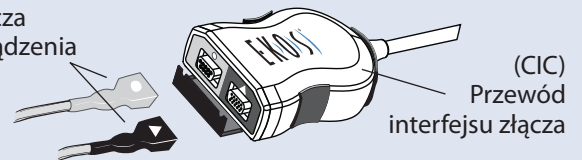

6 WŁĄCZENIE

WŁĄCZYĆ JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ

NACISNĄĆ **START**, ABY AKTYWOWAĆ URZĄDZENIE MICROSONIC

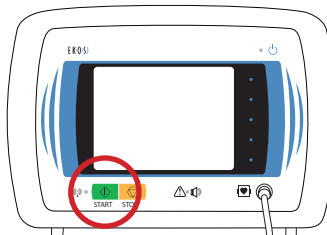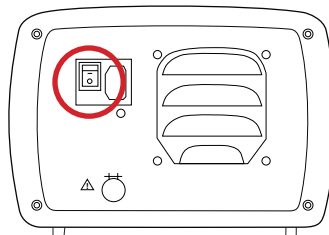

OSTRZEŻENIE!

WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE przed wycofaniem urządzenia MicroSonic z cewnika



EKOS


EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, Stany
Zjednoczone
+1-425-415-3100
Faks: +1-425-415-3101
www.ekoscorp.com

Jeśli problemy występują nadal,
należy skontaktować się z:


Rozwiązywanie problemów

ALARMY JEDNOSTKI STERUJĄCEJ


1 Wyciszyć ALARM

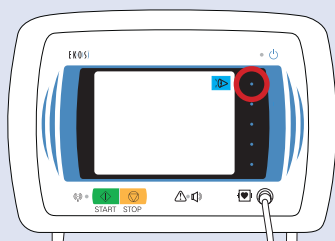

2 Sprawdzić połączenia

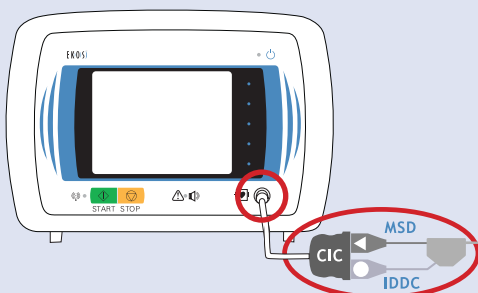


3 Nacisnąć START

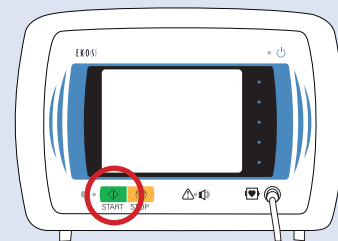


SYSTEM NIE URUCHAMIA SIĘ PONOWNIE

1 WYŁĄCZYĆ i WŁĄCZYĆ jednostkę sterującą
Tył jednostki

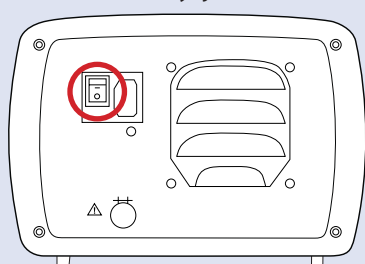


2 Nacisnąć START

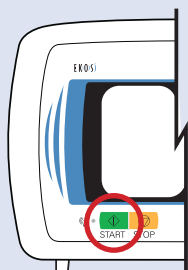

ALARM Z KOMUNIKATEM ROZPOCZĘCIA

1 Nacisnąć START
Jeśli to konieczne

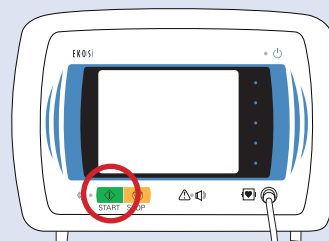

Następujące informacje

można znaleźć w instrukcji:

- Informacje dotyczące identyfikacji IKON
- Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów

EKOSI®

EKOS Corporation
11911 North Creek Parkway S.
Bothell, WA 98011, Stany
Zjednoczone
+1-425-415-3100
Faks: +1-425-415-3101
www.ekoscorp.com

*Jeśli problemy występują nadal,
należy skontaktować się z:*