


# Impostazione

## 1 PRIMING

**ESEGUIRE IL PRIMING DEL LUME DEL FARMACO** con eparina diretta fino a quando il fluido non fuoriesca da tutte le porte laterali

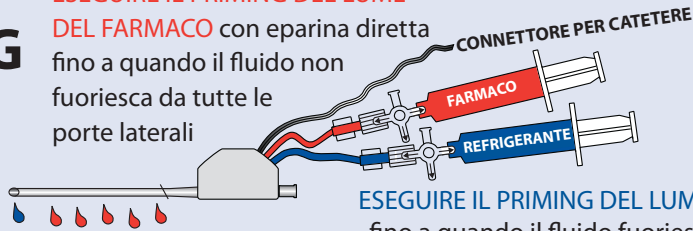

**ESEGUIRE IL PRIMING DEL LUME DEL REFRIGERANTE** fino a quando il fluido fuoriesca dal foro terminale



**AVVERTENZA**  
Non aspirare il sangue nuovamente nel lume del farmaco


## 2 POSIZIONAMENTO

POSIZIONARE IL CATETERE NEL PAZIENTE (guaina 6F o più grande e filo guida da 0,889 mm (0,035"))



**AVVERTENZA**  
Non utilizzare la guaina dell'introduttore con una valvola emostatica rotante

## 3 INSERIMENTO

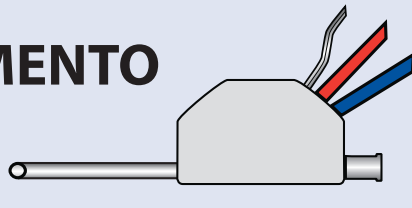


SOSTITUIRE IL FILO GUIDA CON IL DISPOSITIVO MICROSONIC



**AVVERTENZA**  
Non utilizzare un dispositivo Microsonic che si sia piegato durante l'erogazione nel catetere

## 4 POMPA

**CONNETTERE IL LUME DEL FARMACO ALLA POMPA DI INFUSIONE**  
Eeguire l'infusione secondo il protocollo ospedaliero  
Max 35 ml/h  
Min 5 ml/h

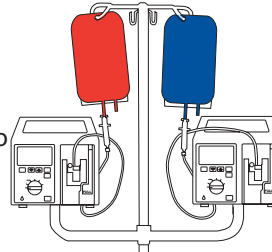


**COLLEGARE IL LUME DEL REFRIGERANTE ALLA POMPA DI INFUSIONE**  
Eeguire l'infusione secondo il protocollo ospedaliero  
Max 120 ml/h  
Min 35 ml/h

ATTIVARE LA POMPA DI INFUSIONE

## 5 CONNESSIONE

CONNETTERE IL DISPOSITIVO ENDOVASCOLARE AL CAVO DI INTERFACCIA CONNETTORE



Connettori del dispositivo

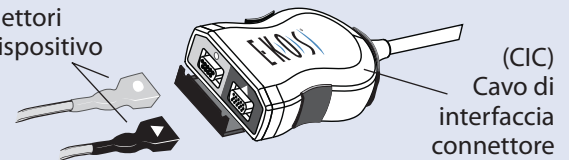

## 6 ACCENSIONE

ACCENDERE L'UNITÀ DI CONTROLLO

PREMERE **START** PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO MICROSONIC

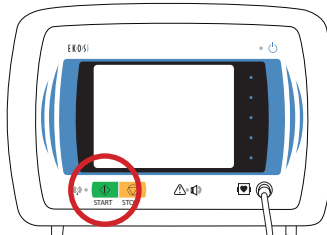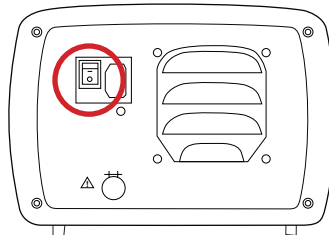

**AVVERTENZA**  
SPEGNERE IL DISPOSITIVO prima di estrarre il dispositivo Microsonic dal catetere

**EKO-S**


EKOS Corporation  
11911 North Creek Parkway S.  
Bothell, WA 98011, USA  
+1-425-415-3100  
Fax: +1-425-415-3101  
www.ekoscorp.com

Nel caso i problemi persistano, contattare:


# Risoluzione dei problemi

## ALLARMI DELL'UNITÀ DI CONTROLLO


**1** Silenziare l'ALLARME

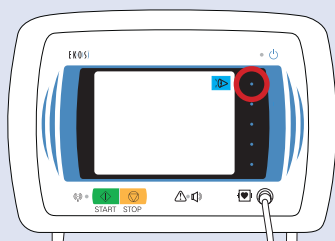

**2** Controllare le connessioni

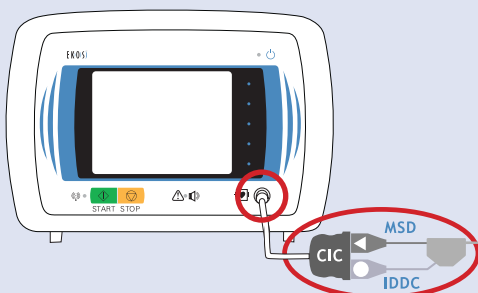


**3** Premere **START**

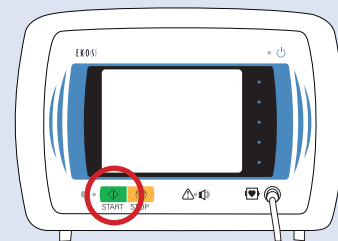


## IL SISTEMA NON SI RIAVVIA

**1** SPEGNERE e poi RIACCENDERE l'unità di controllo  
Parte posteriore dell'unità

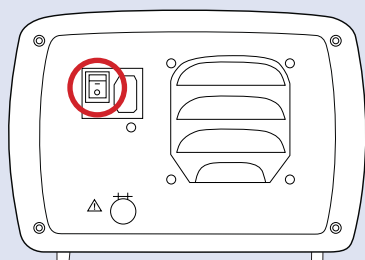


**2** Premere **START**

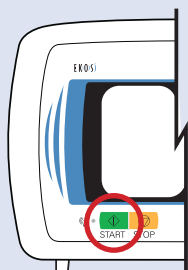

## ALLARME RICHIESTA DI AVVIO

**1** Premere **START** se necessario

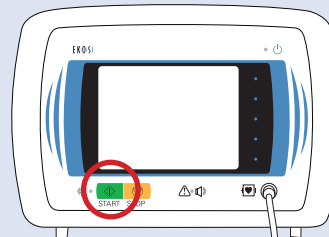

Consultare il manuale per:

- Identificazione dell'ICONA informativa
- Ulteriore risoluzione dei problemi

**EKOS**<sup>®</sup>

EKOS Corporation  
11911 North Creek Parkway S.  
Bothell, WA 98011, USA  
+1-425-415-3100  
Fax: +1-425-415-3101  
www.ekoscorp.com

*Nel caso i problemi persistano, contattare:*

CE  
0086